

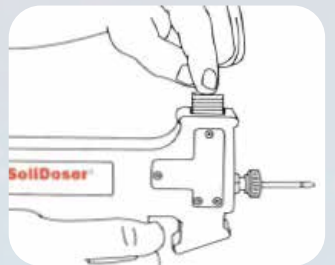
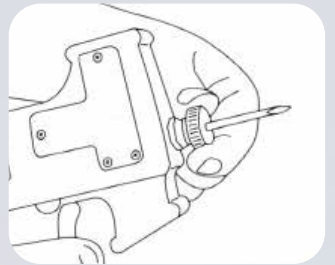


Uso y cuidado de los gránulos **SoliDoser[®]** y **SoliDose[®] Dual-Dose**


- 01** Inserte la base de la aguja en la manga y avance hasta que esté completamente asentado y el bisel esté configurado correctamente.
- 02** Apriete la manga hasta que la aguja esté segura.
- 03** Los pellets deben almacenarse en su bolsa de aluminio y refrigerarse hasta que estén listos para usar. Cuando retire una bolsa del refrigerador o refrigerador, colóquela plana y deje que alcance la temperatura ambiente antes de abrir la bolsa y quitar un clip. Después de quitar un clip, vuelva a sellar la temperatura antes de abrir la bolsa y retirar un clip. Después de quitar un clip, vuelva a sellar la bolsa para ayudar nuevamente a evitar el exceso de humedad. Elimine solo un clip a la vez.
- 04** Abra el envase y retire un clip de 10 dosis. Inserte un clip cargado en la parte superior del SoliDoser y avance hasta que sienta que "encaja" en su lugar. ¡NO apriete el gatillo a menos que el clip esté cargado!
- 05** Sujete al animal y localice el lugar de la inyección en el cuello o en la base de la parte posterior de la oreja.
 - A.** Si se administra en el cuello, vacune debajo de la piel NO en el músculo. "Tentar" la piel antes de insertar la aguja ayudará en la administración adecuada.
 - B.** Si administra detrás de la oreja, inserte el punto de la aguja debajo de la piel suelta en la muesca del cartílago en la parte posterior de la oreja. NO en el tercio medio o en la punta de la oreja.

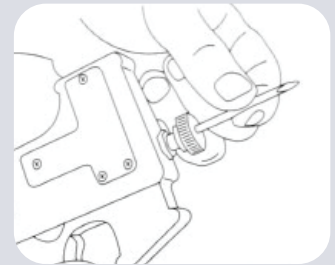

06 Después de insertar toda la longitud de la aguja, apriete el gatillo para implantar los gránulos. Mantenga el gatillo presionado hasta que retire completamente la aguja para asegurarse de que los gránulos permanezcan en su lugar.

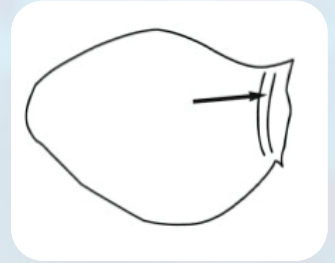

07 Use un paño seco y limpio para limpiar cualquier residuo de la pistola ANTES de soltar el gatillo, luego suelte el gatillo para avanzar automáticamente a la siguiente dosis. Desinfecte y seque FUERA de la aguja entre dosis. NO permita que la humedad entre en la aguja.

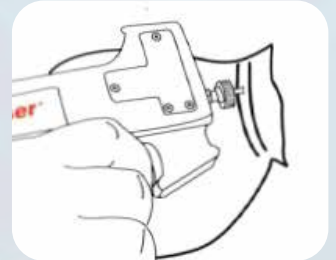

A. En el improbable caso de que un clip no avance, se puede avanzar manualmente utilizando una sonda o un lápiz como herramienta.



B. Nunca utilice fuerza excesiva para operar el SoliDoser.

08 No aplique ninguna resistencia al gatillo, ya que está volviendo a su posición original. Hacerlo puede evitar que el clip avance a la siguiente dosis.



09 El clip se expulsará automáticamente después de administrar la 10ª dosis. NO guarde un clip cargado en el dispositivo, ya que los perdigones pueden hincharse y atascar la pistola. Siempre proteja la pistola y el producto de la humedad.

10 NO guarde el SoliDoser en el refrigerador.



11 Limpie el SoliDoser con un paño húmedo, humedecido con agua o alcohol según sea necesario. NO sumerja el SoliDoser y NO aplique ningún lubricante.

12 No desmonte el SoliDoser.

